



AUDICIÓN FIABLE EN CUALQUIER SITUACIÓN

CATÁLOGO DE PRODUCTO

REXTON



CONFÍA EN REXTON

La vida se complica cuando se empieza a perder audición. En Rexton, no vamos a permitir que la pérdida auditiva dificulte el día a día de las personas. Por eso trabajamos sin descanso para ofrecer una tecnología auditiva probada, de la manera más fiable posible.

Los audífonos Rexton siempre cumplen su función. Funcionan bien en casa, en el trabajo o haciendo ejercicio, y los usuarios se los pueden poner haga el tiempo que haga. Son muy resistentes porque están hechos con los mejores materiales y los sometemos a rigurosas pruebas para garantizar que pueden soportar todo lo que te depare la vida.

¿Sitios ruidosos? ¿Se te han caído sin querer? ¿Te ha pillado la lluvia? ¿Trabajas en un entorno ruidoso? No te preocupes. Pueden con esto y mucho más. En resumen, con ellos, los usuarios están preparados para cualquier situación. Son a prueba de vida.

RELY ON
LIFEPROOF
REXTON



UNA SÓLIDA CARTERA DE PRODUCTOS PARA UNA BUENA AUDICIÓN



TECNOLOGÍA REACH

NUEVO	REACH R-LI T BC (REACH R PLUS)	8
	REACH R-LI Y R-LI T	10
	REACH SR	12
NUEVO	REACH B-LI RUGGED	14
	REACH INOX-CIC LI	16
NUEVO	REACH CUSTOM ITC E ITE	18
	REACH CUSTOM IIC E CIC	20



TECNOLOGÍA BICORE

BICORE R312	24
BICORE CUSTOM LI	26



TECNOLOGÍA MOTIONCORE

M-CORE IX-CIC 29

M-CORE B-LI M, P Y HP 30



CARGADORES 34

REXTON APP 38

NUEVO ACCESORIOS 40

EARWEAR 42

HERRAMIENTAS DE APOYO 50



TECNOLOGÍA REACH

MULTI-VOICE FOCUS

Multi-Voice Focus* escanea el entorno 1000 veces por segundo con cuatro puntos de enfoque independientes. Esto le permite adaptarse constantemente a la dinámica cambiante de la conversación y hacer que la experiencia sea fluida y cómoda. Resaltará las voces de quienes estén hablando en el grupo mientras mantiene el seguimiento de quienes permanecen en silencio, todo sin cambiar entre modos o programas y sin retrasos.

VOICE STABILIZER

Voice Stabilizer controla la compresión para asegurar que todas las voces dentro del punto de enfoque se amplifiquen de la forma más lineal posible cuando el sonido es demasiado alto. Mantiene la relación señal/ruido en positivo para ayudar a los usuarios a concentrarse en la señal con mayor contraste.

MY VOICE 2.0

El sonido general y la propia voz del usuario se procesan por separado, pero en paralelo. De esta manera, la impresión de la voz propia del usuario se mantiene cómoda sin interferir con el procesamiento de la señal ambiental.

CONECTIVIDAD

Los audífonos Reach pueden transmitir llamadas telefónicas y audio a través de MFi, ASHA, LE Audio y Bluetooth Classic**. Las conexiones mediante MFi, LE Audio o Bluetooth Classic permiten realizar llamadas manos libres a través del Modo Headset. Con el Modo Headset, los audífonos captan la voz del usuario sin necesidad de usar los micrófonos del teléfono. Una solución verdaderamente manos libres.

Mientras el Modo Headset está activo, se habilita el Control de Llamadas o Tap Control, que permite al usuario aceptar, rechazar o finalizar una llamada a través del audífono.

LIFEPROOF

Los audífonos Rexton están fabricados con componentes robustos y se prueban exhaustivamente para que puedan resistir todo lo que la vida les depara. Puedes confiar en ellos para soportar los retos cotidianos y los entornos más exigentes

ATEX

La mayoría de las variantes de Reach cuentan con certificación ATEX***, que verifica que han sido probados y aprobados como intrínsecamente seguros para su uso en entornos potencialmente explosivos.

* Solo disponible para audífonos con dos micrófonos en una adaptación binaural.

** Confirma la compatibilidad con el teléfono específico del usuario, ya que la funcionalidad depende de la habilitación del fabricante del teléfono.

*** Pueden utilizarse de forma segura en áreas donde pueda haber sustancias inflamables en el aire, como fábricas de pintura y productos químicos, estaciones de servicio y molinos. El grupo/clase ATEX está impreso en la tarjeta ATEX, la cual debe estar disponible cuando los audífonos se utilicen en atmósferas explosivas.

REACH R-LI T BC (REACH R PLUS)

REACH OFRECE UNA SOLUCIÓN PARA TODOS CON BLUETOOTH CLASSIC




- > Permite a los usuarios participar plenamente en conversaciones grupales con Multi-Voice Focus
- > Llamadas telefónicas manos libres a través del Modo Headset con Control de Llamadas cuando está conectado mediante Bluetooth Classic
- > Cargador portátil con batería integrada
- > Solución recargable para un día completo de uso:
 - > R-Li T BC ofrece hasta 36h de autonomía (incl. 5h de streaming)
 - > R-Li T BC ofrece hasta 54h de autonomía sin streaming
- > Lifeproof para resistir los retos cotidianos
- > Certificación ATEX*
- > La IA con Rexton Assist te ayuda a personalizar tus audífonos de forma fluida

Colores



El rango de adaptación se basa en un acoplador de 2 ccm:

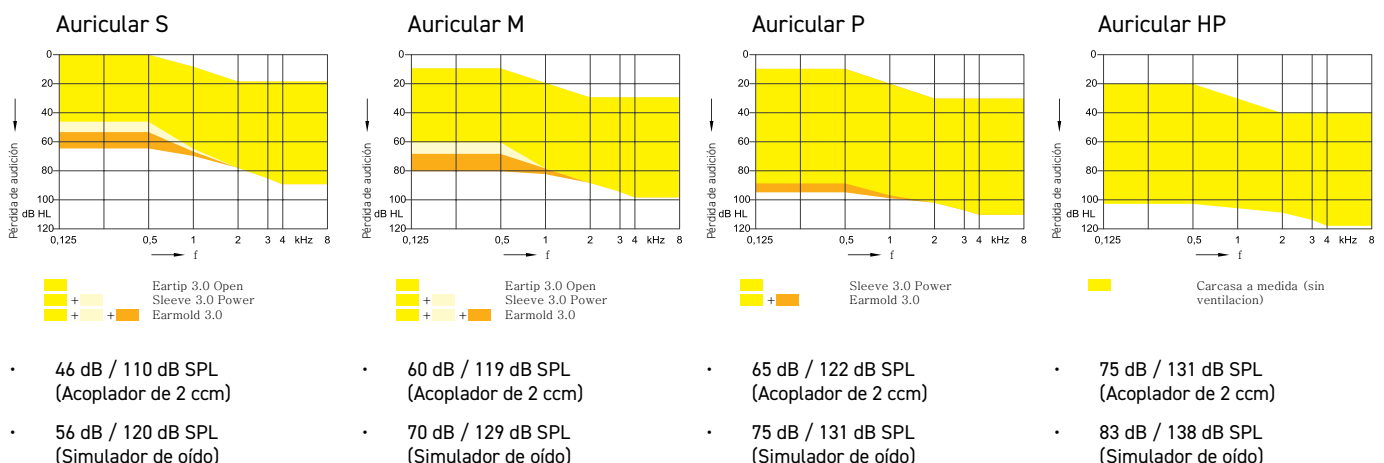

Características/Nivel de rendimiento	80	60	40
Canales/Controles/Programas	48/20/6	36/18/6	32/16/6
LED	•	•	•
T-coil	•	•	•
Bluetooth	•	•	•
Función de sonido para tinnitus	•	•	•
Función Notch para tinnitus	•	•	•
Sincronización inalámbrica	•	•	•
IP68	•	•	•
XPhone	-	-	-
Elementos tecnológicos			
Multi-Voice Focus	•	•	•
Fuentes de enfoque	4	2	1
Estabilizador de voz	•	•	•
Tecnología de Preservación del Habla	•	•	•
My Voice 2.0	•	•	•
Sensor de movimiento para análisis de entornos	•	•	•
Direccionalidad			
Adaptación automática	•	•	•
Localizador de sonido iOmni	•	•	•
Auto iFocus 360	•	-	-
iFocus 360	•	•	-
Auto Focus 360	-	-	-
iLock estéreo automático	•	•	•
Direccionalidad OneMic	-	-	-
Reducción de ruido			
Gestión del ruido	•	•	•
Sound Smoothing	•	•	•
Reducción del ruido de viento	•	•	•
Auto Echo Reducer	•	-	-
Reductor de reverberación	•	•	-
Control y calidad de sonido			
Extensión de ancho de banda	•	-	-
Compresión de ancho de banda	•	•	•
Sistema de prevención de retroalimentación	•	•	•
Mejorador de música (presets)	3	3	1
Aclimatación automática	•	•	•
Transmisión de audio			
Bluetooth Classic	•	•	•
LE Audio	-	-	-
MFi	-	-	-
ASHA	-	-	-
Modo auriculares			
Bluetooth Classic	•	•	•
LE Audio	-	-	-
MFi	-	-	-
TeleCare			
Ajuste remoto en vivo completo	•	•	•
Ajuste remoto básico mediante portal	•	•	•
Accesorios y App		Cargadores	CROS
Smart Key	•	Cargador de mesa	•
TV Sound	•	Cargador portátil	•
Smart Transmitter 2,4	-	Cargador portátil+	•
Smart Mic	-	Cargador portátil IF CIC	-
Rexton App	•	Cargador universal por cable	•
Programadores			
Noahlink Wireless	•		
ConnexxAir	-		
HI-PRO	-		

REACH R-LI Y R-LI T




- › Permite a los usuarios participar plenamente en conversaciones grupales con Multi-Voice Focus
- › Llamadas telefónicas manos libres mediante Headset Mode con control de llamadas al conectarse vía MFi o LE Audio
- › Cargador portátil con batería integrada
- › Soluciones recargables para un día completo de uso:
 - › R-Li ofrece hasta 24h de autonomía (incl. 5h de streaming)
 - › R-Li T ofrece hasta 34h de autonomía (incl. 5h de streaming)
- › Lifeproof para resistir los retos cotidianos
- › Certificación ATEX
- › IA con Rexton Assist te ayuda a personalizar tus audífonos sin interrupciones

Colores



Todo el rango de adaptación se basa en un acoplador de 2 cm³:

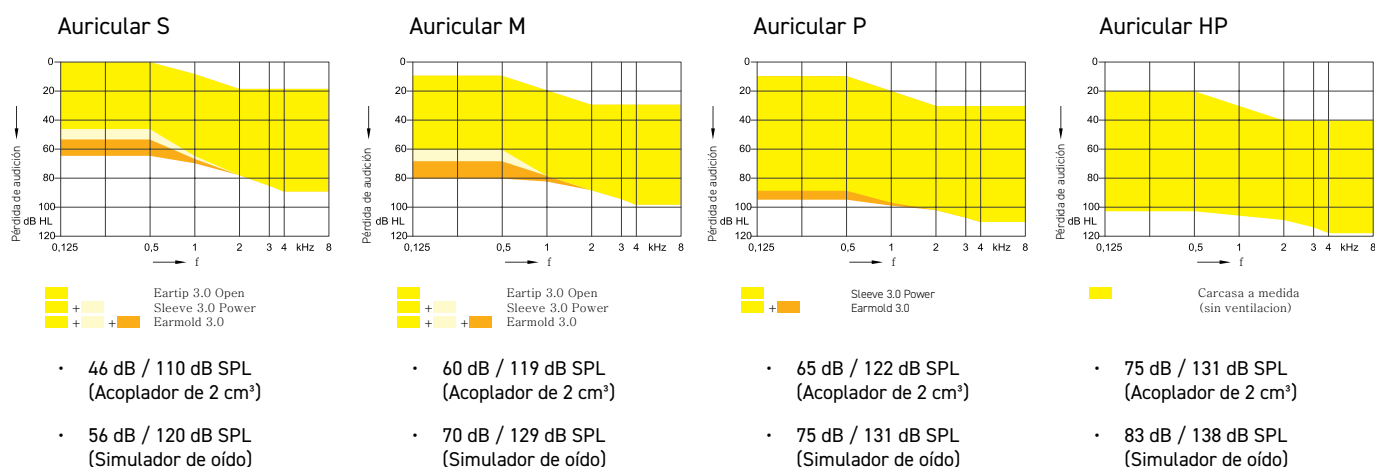

Características/Nivel de rendimiento	80	60	40	30	20
Canales/Controles/Programas	48/20/6	36/18/6	32/16/6	24/12/4	16/8/4
LED	-	-	-	-	-
T-coil	R-Li T	R-Li T	R-Li T	R-Li T	R-Li T
Bluetooth	•	•	•	•	•
Función de sonido para tinnitus	•	•	•	•	-
Función Notch para tinnitus	•	•	•	•	-
Sincronización inalámbrica	•	•	•	•	•
IP68	•	•	•	•	•
XPhone	•	•	•	•	•
Elementos tecnológicos					
Multi-Voice Focus	•	•	•	-	-
Fuentes de enfoque	4	2	1	1	1
Estabilizador de voz	•	•	•	•	•
Tecnología de Preservación del Habla	•	•	•	•	•
My Voice 2.0	•	•	•	-	-
Sensor de movimiento para análisis de entornos	•	•	•	-	-
Direccionalidad					
Adaptación automática	•	•	•	•	A
Localizador de sonido iOmni	•	•	•	•	•
Auto iFocus 360	•	-	-	-	-
iFocus 360	•	•	-	-	-
Auto Focus 360	-	-	-	-	-
iLock estéreo automático	•	•	•	-	-
Direccionalidad OneMic	-	-	-	-	-
Reducción de ruido					
Gestión del ruido	•	•	•	•	•
Sound Smoothing	•	•	•	•	•
Reducción del ruido de viento	•	•	•	•	•
Auto Echo Reducer	•	-	-	-	-
Reductor de reverberación	•	•	-	-	-
Control y calidad de sonido					
Extensión de ancho de banda	•	-	-	-	-
Compresión de ancho de banda	•	•	•	•	•
Sistema de prevención de retroalimentación	•	•	•	•	•
Mejorador de música (presets)	3	3	1	1	-
Aclimatación automática	•	•	•	•	•
Transmisión de audio					
Bluetooth Classic	-	-	-	-	-
LE Audio	•	•	•	•	•
MF	•	•	•	•	•
ASHA	•	•	•	•	•
Modo auriculares					
Bluetooth Classic	-	-	-	-	-
LE Audio	•	•	•	•	•
MF	•	•	•	•	•
TeleCare					
Ajuste remoto en vivo completo	•	•	•	•	•
Ajuste remoto básico mediante portal	•	•	•	•	•
Accesorios y App		Cargadores		CROS	
Smart Key	•	Cargador de mesa	•	Reach CROS R-Li T BC	-
TV Sound	•	Cargador portátil	•	Reach CROS R-Li	•
Smart Transmitter 2,4	•	Cargador portátil+	•	Reach CROS SR	-
Smart Mic	•	Cargador portátil IF CIC	-	Reach CROS iX-CIC Li	-
Rexton App	•	Cargador universal por cable	•		
Programadores					
Noahlink Wireless	•				
ConnexxAir	-				
HI-PRO	-				

REACH SR



- › Permite a los usuarios participar plenamente en conversaciones grupales con Multi-Voice Focus
- › Llamadas telefónicas con manos libres a través del Modo Auricular con Tap Control, al conectarse mediante MFi o LE Audio
- › Cargador portátil con batería integrada
- › Solución recargable para un día completo de uso:
 - › SR ofrece hasta 17h de autonomía (incluyendo 5h de streaming)
- › Resistente para afrontar los retos del día a día
- › Certificación ATEX
- › IA con Rexton Assist te ayuda a personalizar tus audífonos de forma sencilla

Colores

Black | Black Gloss



Cosmic Blue | Rose Gold



Snow White | Rose Gold



Snow White | Snow White Gloss




Black | Silver




El rango de adaptación se basa en un acoplador de 2 cm³:


Auricular S

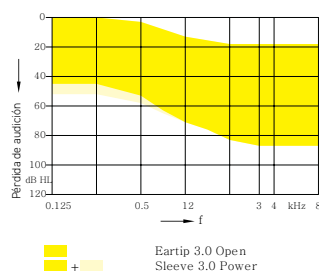

Auricular M

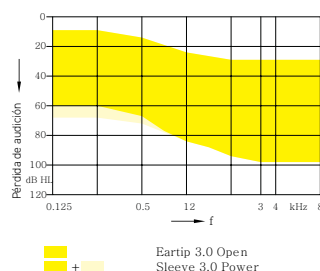

Auricular P

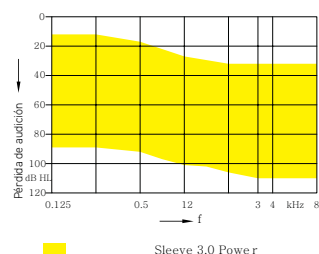

- 46 dB / 110 dB SPL (Acoplador de 2cm³)
- 56 dB / 120 dB SPL (Simulador de oído)

- 60 dB / 119 dB SPL (Acoplador de 2cm³)
- 70 dB / 129 dB SPL (Simulador de oído)

- 65 dB / 122 dB SPL (Acoplador de 2cm³)
- 75 dB / 131 dB SPL (Simulador de oído)

Características/Nivel de rendimiento	80	60	40	30	20
Canales/Controles/Programas	48/20/6	36/18/6	32/16/6	24/12/4	16/8/4
LED	-	-	-	-	-
T-coil	-	-	-	-	-
Bluetooth	•	•	•	•	•
Función de sonido para tinnitus	•	•	•	•	-
Función Notch para tinnitus	•	•	•	•	-
Sincronización inalámbrica	•	•	•	•	•
IP68	•	•	•	•	•
XPhone	•	•	•	•	•
Elementos tecnológicos					
Multi-Voice Focus	•	•	•	-	-
Fuentes de enfoque	4	2	1	1	1
Estabilizador de voz	•	•	•	•	•
Tecnología de Preservación del Habla	•	•	•	•	•
My Voice 2.0	•	•	•	-	-
Sensor de movimiento para análisis de entornos	•	•	•	-	-
Direccionalidad					
Adaptación automática	•	•	•	•	• ^A
Localizador de sonido iOmní	•	•	•	•	•
Auto iFocus 360	•	-	-	-	-
iFocus 360	•	•	-	-	-
Auto Focus 360	-	•	-	-	-
iLock estéreo automático	•	•	•	-	-
Direccionalidad OneMic	-	-	-	-	-
Reducción de ruido					
Gestión del ruido	•	•	•	•	•
Sound Smoothing	•	•	•	•	•
Reducción del ruido de viento	•	•	•	•	•
Auto Echo Reducer	•	-	-	-	-
Reductor de reverberación	•	•	-	-	-
Control y calidad de sonido					
Extensión de ancho de banda	•	-	-	-	-
Compresión de ancho de banda	•	•	•	•	•
Sistema de prevención de retroalimentación	•	•	•	•	•
Mejorador de música (presets)	3	3	1	1	-
Aclimatación automática	•	•	•	•	•
Transmisión de audio					
Bluetooth Classic	-	-	-	-	-
LE Audio	•	•	•	•	•
MFfi	•	•	•	•	•
ASHA	•	•	•	•	•
Modo auriculares					
Bluetooth Classic	-	-	-	-	-
LE Audio	•	•	•	•	•
MFfi	•	•	•	•	•
TeleCare					
Ajuste remoto en vivo completo	•	•	•	•	•
Ajuste remoto básico mediante portal	•	•	•	•	•
Accesorios y App		Cargadores		CROS	
Smart Key	•	Cargador de mesa	-	Reach CROS R-Li T BC	-
TV Sound	•	Cargador portátil	•	Reach CROS R-Li	-
Smart Transmitter 2,4	•	Cargador portátil+	•	Reach CROS SR	•
Smart Mic	•	Cargador portátil IF CIC	-	Reach CROS iX-CIC Li	-
Rexton App	•	Cargador universal por cable	-		
Programadores					
Noahlink Wireless	•				
ConnexxAir	-				
HI-PRO	-				

REACH B-LI RUGGED

NUESTRO AUDÍFONO MÁS RESISTENTE AHORA CON MULTI-VOICE FOCUS




- › Permite a los usuarios participar plenamente en conversaciones grupales con Multi-Voice Focus
- › Con My Voice 2.0, la voz propia del usuario se mantiene cómoda gracias a un procesamiento dedicado separado de los sonidos del habla objetivo
- › Llamadas telefónicas manos libres a través del Modo Headset con Control de Llamadas cuando está conectado mediante MFi o LE Audio
- › Solución recargable para un día completo de uso:
 - › Rugged ofrece hasta 32h de autonomía (incl. 5h de streaming)
 - › Rugged ofrece hasta 36h de autonomía sin streaming
- › Lifeproof para resistir los retos cotidianos
- › La IA con Rexton Assist te ayuda a personalizar tus audífonos de forma fluida

Rugged ofrece una resistencia única:

- › Construcción resistente al agua
- › A prueba de sudor
- › A prueba de caídas
- › Resistente a los arañazos
- › Certificación IP68
- › Certificación ATEX*

Colores	Dark Champagne Granite	Granite Black	Grey Granite	Rose Gold Rose Gold	Sandy Brown Granite	Silver Silver	Beige Beige	Black Black

El rango de adaptación se basa en un acoplador de 2 ccm:

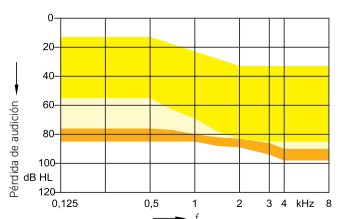

ThinTube 3.0 + Eartip 3.0 Open
ThinTube 3.0 P + Sleeve 3.0 Pwre
Earhook + Mat

Codo

- 60 dB / 133 dB SPL (Acoplador de 2 ccm)
- 67 dB / 138 dB SPL (Simulador de oído)

DISEÑO RESISTENTE CON UN TAMAÑO SÚPER COMPACTO

Nuestro audífono más resistente ahora está disponible dentro de nuestra plataforma Reach. Reach Rugged ofrecerá un excelente procesamiento de sonido en un diseño pequeño y seguro. Su estructura cuenta con un receptor hermético, contactos de carga sellados, suspensión del receptor reforzada, carcasa engrosada y líneas de unión selladas.

Comparación de tamaño
28.80mm 29.40mm



Reach
R-Li T

Reach B-Li
Rugged

Características/Nivel de rendimiento	80	60	40
Canales/Controles/Programas	48/20/6	36/18/6	32/16/6
LED	-	-	-
T-coil	•	•	•
Bluetooth	•	•	•
Función de sonido para tinnitus	•	•	•
Función Notch para tinnitus	•	•	•
Sincronización inalámbrica	•	•	•
IP68	•	•	•
XPhone	•	•	•
Elementos tecnológicos			
Multi-Voice Focus	•	•	•
Fuentes de enfoque	4	2	1
Estabilizador de voz	•	•	•
Tecnología de Preservación del Habla	•	•	•
My Voice 2.0	•	•	•
Sensor de movimiento para análisis de entornos	•	•	•
Direccionalidad			
Adaptación automática	•	•	•
Localizador de sonido iOmni	•	•	•
Auto iFocus 360	•	-	-
iFocus 360	•	•	-
Auto Focus 360	-	•	-
iLock estéreo automático	•	•	•
Direccionalidad OneMic	-	-	-
Reducción de ruido			
Gestión del ruido	•	•	•
Sound Smoothing	•	•	•
Reducción del ruido de viento	•	•	•
Auto Echo Reducer	•	-	-
Reductor de reverberación	•	•	-
Control y calidad de sonido			
Extensión de ancho de banda	•	-	-
Compresión de ancho de banda	•	•	•
Sistema de prevención de retroalimentación	•	•	•
Mejorador de música (presets)	3	3	1
Aclimatación automática	•	•	•
Transmisión de audio			
Bluetooth Classic	-	-	-
LE Audio	•	•	•
MFi	•	•	•
ASHA	•	•	•
Modo auriculares			
Bluetooth Classic	-	-	-
LE Audio	•	•	•
MFi	•	•	•
TeleCare			
Ajuste remoto en vivo completo	•	•	•
Ajuste remoto básico mediante portal	•	•	•
Accesorios y App		Cargadores	
Smart Key	•	Cargador de mesa	•
TV Sound	•	Cargador portátil	-
Smart Transmitter 2,4	•	Cargador portátil+	-
Smart Mic	•	Cargador portátil IF CIC	-
Rexton App	•	Cargador universal por cable	-
Programadores		CROS	
Noahlink Wireless	•	Reach CROS R-Li T BC	-
ConnexxAir	-	Reach CROS R-Li	•
HI-PRO	-	Reach CROS SR	-
		Reach CROS iX-CIC Li	-

REACH INOX-CIC LI

EL PRIMER AUDÍFONO INVISIBLE CON CAPACIDAD DE RECARGA




- > Con Voice Stabilizer, el contraste en cada conversación se controla para facilitar la inteligibilidad del habla
- > La Direccionalidad OneMic permite aprovechar las ventajas de un micrófono direccional
- > Un diseño discreto y de fácil manejo lo hace prácticamente invisible
- > Cargador portátil con batería integrada
- > Solución recargable para un día completo de uso:
 - > inoX-CIC Li ofrece hasta 28h de autonomía
- > Resistente para afrontar los retos del día a día
- > Certificación ATEX

Colores de las placas



Todo el rango de adaptación se basa en un acoplador de 2 cm³:

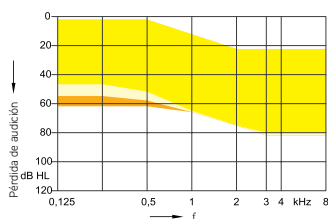

Eartip 3.0 Open
 + Sleeve 3.0 Power
 + Earmold 3.0

- 50 dB / 114 dB SPL (Acoplador de 2 cm³)
- 61 dB / 126 dB SPL (Simulador de oído)



Para un ajuste recargable personalizado pero invisible, Reach inoX-CIC Li es compatible con moldes auditivos.

Características/Nivel de rendimiento	80	60	40	30	20
Canales/Controles/Programas	48/20/6	36/18/6	32/16/6	24/12/4	16/8/4
LED	-	-	-	-	-
T-coil	-	-	-	-	-
Bluetooth	-	-	-	-	-
Función de sonido para tinnitus	•	•	•	•	-
Función Notch para tinnitus	•	•	•	•	-
Sincronización inalámbrica	•	•	•	•	•
IP68	•	•	•	•	•
XPhone	•	•	•	•	•
Elementos tecnológicos					
Multi-Voice Focus	-	-	-	-	-
Fuentes de enfoque	-	-	-	-	-
Estabilizador de voz	•	•	•	•	•
Tecnología de Preservación del Habla	-	-	-	-	-
My Voice 2.0	-	-	-	-	-
Sensor de movimiento para análisis de entornos	-	-	-	-	-
Direccionalidad					
Adaptación automática	•	•	•	-	-
Localizador de sonido iOmni	-	-	-	-	-
Auto iFocus 360	-	-	-	-	-
iFocus 360	-	-	-	-	-
Auto Focus 360	-	-	-	-	-
iLock estéreo automático	-	-	-	-	-
Direccionalidad OneMic	•	•	•	-	-
Reducción de ruido					
Gestión del ruido	•	•	•	•	•
Sound Smoothing	•	•	•	•	•
Reducción del ruido de viento	•	•	•	•	•
Auto Echo Reducer	•	-	-	-	-
Reductor de reverberación	•	•	-	-	-
Control y calidad de sonido					
Extensión de ancho de banda	•	-	-	-	-
Compresión de ancho de banda	•	•	•	•	•
Sistema de prevención de retroalimentación	•	•	•	•	•
Mejorador de música (presets)	3	3	1	1	-
Aclimatación automática	•	•	•	•	•
Transmisión de audio					
Bluetooth Classic	-	-	-	-	-
LE Audio	-	-	-	-	-
MFfi	-	-	-	-	-
ASHA	-	-	-	-	-
Modo auriculares					
Bluetooth Classic	-	-	-	-	-
LE Audio	-	-	-	-	-
MFfi	-	-	-	-	-
TeleCare					
Ajuste remoto en vivo completo	-	-	-	-	-
Ajuste remoto básico mediante portal	•	•	•	•	•
Accesorios y App		Cargadores		CROS	
Smart Key	•	Cargador de mesa	-	Reach CROS R-Li T BC	-
TV Sound	-	Cargador portátil	-	Reach CROS R-Li	-
Smart Transmitter 2,4	-	Cargador portátil+	-	Reach CROS SR	-
Smart Mic	-	Cargador portátil IF CIC	•	Reach CROS iX-CIC Li	•
Rexton App	•	Cargador universal por cable	-		
Programadores					
Noahlink Wireless	-				
ConnexxAir	•				
HI-PRO	-				

REACH CUSTOM ITC E ITE



- > Permite a los usuarios participar plenamente en conversaciones grupales con Multi-Voice Focus
- > Con Voice Stabilizer, el contraste en cada conversación se controla para facilitar la inteligibilidad del habla
- > Soluciones con pila (tamaño 312) para un día completo de uso:
 - > Custom ITC e ITE ofrecen hasta 135 h de autonomía, según la potencia del receptor y la configuración del micrófono
- > Resistente para afrontar los retos del día a día


Configuración de la placa frontal:

- > Placa N:
 - > Configuración de un micrófono disponible para ITC
- > Placa N4:
 - > Configuración de dos micrófonos disponible para ITC e ITE
- > Ambas placas frontales ofrecen de forma opcional:
 - > Telecoil
 - > Pulsador y/o rueda de control de volumen
 - > Opción sin conectividad inalámbrica

Colores



El rango de adaptación se basa en un acoplador de 2 ccm:

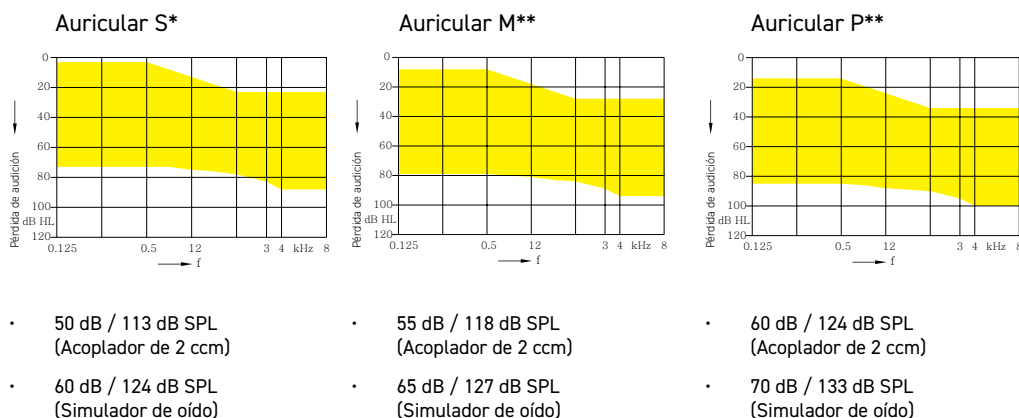

* Disponible para ITC

** Disponible tanto para ITC como para ITE

Características/Nivel de rendimiento	80	60	40	30	20
Canales/Controles/Programas	48/20/6	36/18/6	32/16/6	24/12/4	16/8/4
LED	-	-	-	-	-
T-coil	o	o	o	o	o
Bluetooth	-	-	-	-	-
Función de sonido para tinnitus	•	•	•	•	-
Función Notch para tinnitus	•	•	•	•	-
Sincronización inalámbrica	•	•	•	•	•
IP68	-	-	-	-	-
XPhone	•	•	•	•	•
Elementos tecnológicos					
Multi-Voice Focus	•	•	•	-	-
Fuentes de enfoque	4	2	1	1	1
Estabilizador de voz	•	•	•	•	•
Tecnología de Preservación del Habla	•	•	•	•	•
My Voice 2.0	-	-	-	-	-
Sensor de movimiento para análisis de entornos	-	-	-	-	-
Direccionalidad					
Adaptación automática	•	•	•	•	•
Localizador de sonido iOmni	-	-	-	-	-
Auto iFocus 360	•	-	-	-	-
iFocus 360	•	•	-	-	-
Auto Focus 360	-	•	-	-	-
iLock estéreo automático	•	•	•	-	-
Direccionalidad OneMic	-	-	-	-	-
Reducción de ruido					
Gestión del ruido	•	•	•	•	•
Sound Smoothing	•	•	•	•	•
Reducción del ruido de viento	•	•	•	•	•
Auto Echo Reducer	•	-	-	-	-
Reductor de reverberación	•	•	-	-	-
Control y calidad de sonido					
Extensión de ancho de banda	•	-	-	-	-
Compresión de ancho de banda	•	•	•	•	•
Sistema de prevención de retroalimentación	•	•	•	•	•
Mejorador de música (presets)	3	3	1	1	-
Aclimatación automática	•	•	•	•	•
Transmisión de audio					
Bluetooth Classic	-	-	-	-	-
LE Audio	-	-	-	-	-
MFi	-	-	-	-	-
ASHA	-	-	-	-	-
Modo auriculares					
Bluetooth Classic	-	-	-	-	-
LE Audio	-	-	-	-	-
MFi	-	-	-	-	-
TeleCare					
Ajuste remoto en vivo completo	-	-	-	-	-
Ajuste remoto básico mediante portal	•	•	•	•	•
Accesorios y App		CROS			
Smart Key	•	Reach CROS R-Li T BC	-		
TV Sound	-	Reach CROS R-Li	-		
Smart Transmitter 2,4	-	Reach CROS SR	-		
Smart Mic	-	Reach CROS iX-CIC Li	•		
Rexton App	•				
Programadores					
Noahlink Wireless	-				
ConnexxAir	•				
HI-PRO	•				

Las funciones se basan en una configuración de dos micrófonos con opción inalámbrica.

A) Fijo adaptable

• Disponible - No disponible u opcional

REACH CUSTOM IIC Y CIC

AUDÍFONOS PERSONALIZADOS CASI INVISIBLES



- › Con Voice Stabilizer, el contraste en cada conversación se controla para facilitar la inteligibilidad del habla
- › La Direccionalidad OneMic permite aprovechar las ventajas de un micrófono direccional
- › Nuestra solución personalizada más pequeña hasta ahora
- › Soluciones con batería con un 36% más de duración en comparación con su predecesor:
 - › Custom IIC y CIC (pila tamaño 10) ofrecen hasta 75h de autonomía
- › Resistente para afrontar los retos del día a día

Colores

Black



Brown




Mocha




El rango de adaptación se basa en un acoplador de 2 cm³:

Auriculares S*

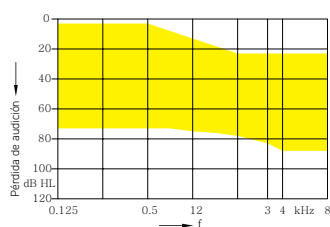


- 50 dB / 113 dB SPL (Acoplador de 2 cm³)
- 60 dB / 124 dB SPL (Simulador de oído)

Auricular M**

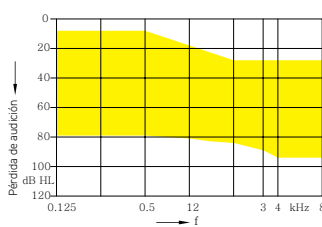

- 55 dB / 118 dB SPL (Acoplador de 2 cm³)
- 65 dB / 127 dB SPL (Simulador de oído)

Auricular P**

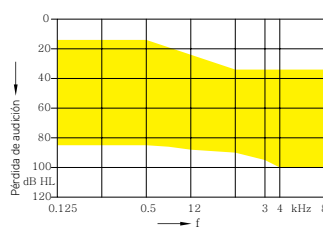

- 60 dB / 124 dB SPL (Acoplador de 2 cm³)
- 70 dB / 133 dB SPL (Simulador de oído)

* Disponible para IIC y CIC

** Disponible para CIC

Características/Nivel de renmiento	80	60	40	30	20
Canales/Controles/Programas	48/20/6	36/18/6	32/16/6	24/12/4	16/8/4
LED	-	-	-	-	-
T-coil	-	-	-	-	-
Bluetooth	-	-	-	-	-
Función de sonido para tinnitus	*	*	*	*	-
Función Notch para tinnitus	*	*	*	*	-
Sincronización inalámbrica	*	*	*	*	*
IP68	-	-	-	-	-
XPhone	*	*	*	*	*
Elementos tecnológicos					
Multi-Voice Focus	-	-	-	-	-
Fuentes de enfoque	-	-	-	-	-
Estabilizador de voz	*	*	*	*	*
Tecnología de Preservación del Habla	-	-	-	-	-
My Voice 2.0	-	-	-	-	-
Sensor de movimiento para análisis de entornos	-	-	-	-	-
Direccionalidad					
Adaptación automática	*	*	*	-	-
Localizador de sonido iOmni	-	-	-	-	-
Auto iFocus 360	-	-	-	-	-
iFocus 360	-	-	-	-	-
Auto Focus 360	-	-	-	-	-
iLock estéreo automático	-	-	-	-	-
Direccionalidad OneMic	*	*	*	-	-
Reducción de ruido					
Gestión del ruido	*	*	*	*	*
Sound Smoothing	*	*	*	*	*
Reducción del ruido de viento	*	*	*	*	*
Auto Echo Reducer	*	-	-	-	-
Reductor de reverberación	*	*	-	-	-
Control y calidad de sonido					
Extensión de ancho de banda	*	-	-	-	-
Compresión de ancho de banda	*	*	*	*	*
Sistema de prevención de retroalimentación	*	*	*	*	*
Mejorador de música (presets)	3	3	1	1	-
Aclimatación automática	*	*	*	*	*
Transmisión de audio					
Bluetooth Classic	-	-	-	-	-
LE Audio	-	-	-	-	-
MFi	-	-	-	-	-
ASHA	-	-	-	-	-
Modo auriculares					
Bluetooth Classic	-	-	-	-	-
LE Audio	-	-	-	-	-
MFi	-	-	-	-	-
TeleCare					
Ajuste remoto en vivo completo	-	-	-	-	-
Ajuste remoto básico mediante portal	*	*	*	*	*
Accesorios y App		CROS			
Smart Key	*	Reach CROS R-Li T BC	-		
TV Sound	-	Reach CROS R-Li	-		
Smart Transmitter 2,4	-	Reach CROS SR	-		
Smart Mic	-	Reach CROS iX-CIC Li	*		
Rexton App	*				
Programadores					
Noahlink Wireless	-				
ConnexxAir	*				
HI-PRO	*				

TECNOLOGÍA BICORE

SONIDO LIMPIO

BiCore utiliza un innovador procesamiento de sonido para reconstruir fielmente el paisaje sonoro ambiental para el usuario de audífonos. La robusta etapa de entrada y el nuevo convertidor A/D pueden manejar señales de entrada de hasta 117 dB SPL sin distorsión, asegurando que lo que entra también salga igual: limpio y claro.

TECNOLOGÍA DE PRESERVACIÓN DEL HABLA

La Tecnología Patentada de Preservación del Habla* (SPT) aprovecha la separación espacial entre los sonidos del habla y el ruido competidor. Este análisis direccional permite un procesamiento independiente del habla y el ruido antes de mezclarlos.

Un enlace binaural inalámbrico ultrarrápido mantiene sincronizados los audífonos izquierdo y derecho, reaccionando de forma instantánea y precisa a los cambios en el entorno sonoro. BiCore ofrece una latencia del sistema, incluido el procesamiento binaural, de solo 8 ms.

MY VOICE 2.0

El sonido general y la propia voz del usuario se procesan por separado, pero en paralelo. De esta manera, la percepción de la voz propia resulta cómoda sin interferir con el procesamiento de las señales ambientales.

CONECTIVIDAD

Los audífonos BiCore pueden transmitir llamadas y audio desde iPhone mediante MFi y desde Android mediante ASHA**. Cuando están conectados a iOS, los usuarios pueden disfrutar de llamadas manos libres a través del modo auricular (Headset Mode).

LIFEPROOF

Los audífonos Rexton están fabricados con componentes robustos y se prueban exhaustivamente para resistir cualquier situación de la vida diaria. Puedes confiar en ellos para afrontar los retos cotidianos y los entornos más exigentes.

ATEX

La mayoría de las tipologías de BiCore cuentan con certificación ATEX***, lo que garantiza que han sido probados y aprobados como intrínsecamente seguros para su uso en entornos potencialmente explosivos.

* Solo disponible para audífonos con dos micrófonos en una adaptación binaural.

** Asegúrate de confirmar la compatibilidad con el teléfono específico del usuario, ya que la funcionalidad depende de la habilitación del fabricante del teléfono.

*** Pueden usarse de forma segura en áreas donde pueda haber sustancias inflamables en el aire, como fábricas de pintura y productos químicos, estaciones de servicio y molinos. El grupo/clase ATEX está impreso en la tarjeta ATEX, la cual debe estar disponible al usar los audífonos en atmósferas explosivas.



BICORE R312



- › La Tecnología de Preservación del Habla (Speech Preservation Technology) ofrece por primera vez un procesamiento separado entre el habla objetivo proveniente del frente y el ruido no deseado desde atrás
- › Con My Voice 2.0, la propia voz del usuario se mantiene cómoda gracias a un procesamiento dedicado y separado de los sonidos del habla objetivo
- › Llamadas telefónicas manos libres a través del Modo Auricular con Call Control, al conectarse mediante MFi
- › Solución con pila (tamaño 312) para un día completo de uso:
 - › R312 ofrece hasta 72h de autonomía (incluidas 20h de streaming)
- › Resistente para afrontar los retos del día a día
- › La IA con Rexton Assist te ayuda a personalizar tus audífonos de manera sencilla


*Disponible como BiCore R312 BT 10

Colores



* El R312 BT 10 solo está disponible en los colores Black, Granite y Beige

El rango de adaptación se basa en un acoplador de 2 ccm:

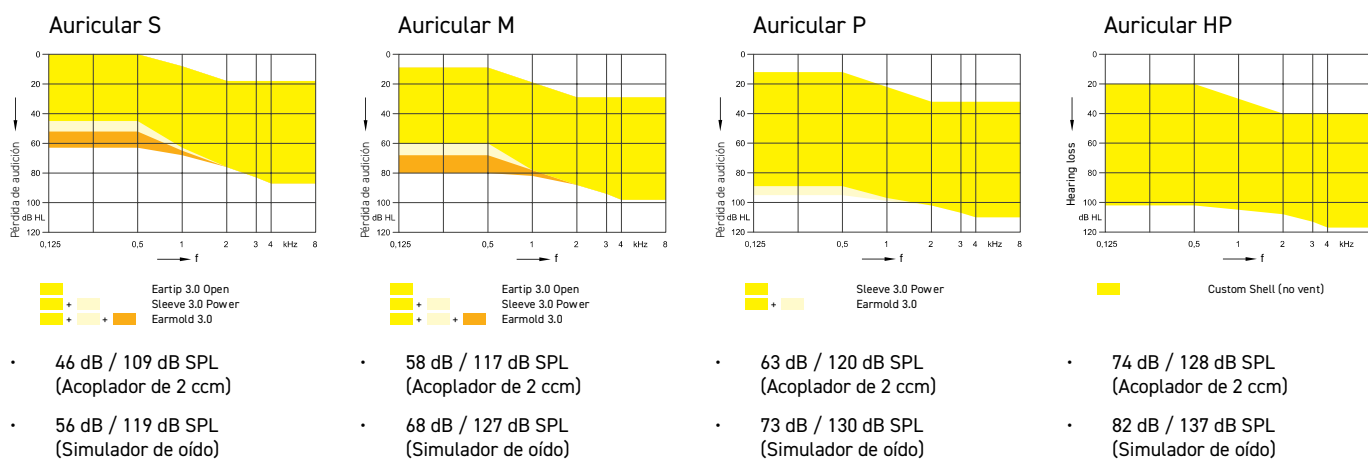

Características/Nivel de rendimiento	80	60	40	30	20	10
Canales/Controles/Programas	48/20/6	32/16/6	24/12/6	16/8/4	16/8/4	12/6/4
LED	-	-	-	-	-	-
T-coil	-	-	-	-	-	-
Bluetooth	•	•	•	•	•	•
Función de sonido para tinnitus	•	•	•	•	-	-
Función Notch para tinnitus	•	•	•	•	-	-
Sincronización inalámbrica	•	•	•	•	•	•
IP68	•	•	•	•	•	•
XPhone	•	•	•	•	•	-
Elementos tecnológicos						
Tecnología de Preservación del Habla	•	•	•	•	•	•
Rango de voz	•	•	•	•	•	•
My Voice 2.0	•	•	•	-	-	-
Sensor de movimiento para el análisis de la escena	•	•	•	-	-	-
Direccionalidad						
Adaptación automática	•	•	•	•	•	-
Localizador de sonido iOmni	•	•	•	•	•	-
Auto iFocus 360	•	-	-	-	-	-
iFocus 360	•	•	-	-	-	-
Auto Focus 360	-	•	-	-	-	-
iLock estéreo automático	•	•	•	-	-	-
Direccionalidad OneMic	-	-	-	-	-	-
Reducción de ruido						
Gestión de ruido	•	•	•	•	•	•
Sound Smoothing	•	•	•	•	-	-
Direccionalidad	•	•	-	-	-	-
Reducción de ruido de viento	•	•	•	•	-	-
Reductor automático de eco	•	-	-	-	-	-
Reductor de reverberación	•	•	-	-	-	-
Control y calidad de sonido						
Extensión de ancho de banda	•	-	-	-	-	-
Compresión de ancho de banda	•	•	•	•	•	-
Prevención de retroalimentación (Feedback)	•	•	•	•	•	•
Mejorador de música (ajustes preestablecidos)	3	3	1	1	-	-
Aclimatización automática	•	•	•	•	•	-
Transmisión de audio						
Bluetooth Classic	-	-	-	-	-	-
LE Audio	-	-	-	-	-	-
MFi	•	•	•	•	•	•
ASHA	•	•	•	•	•	•
Modo auriculares						
Bluetooth Classic	-	-	-	-	-	-
LE Audio	-	-	-	-	-	-
MFi	•	•	•	-	-	-
TeleCare						
Ajuste remoto en vivo completo	•	•	•	•	•	•
Ajuste remoto básico a través del portal	•	•	•	•	•	•
Accesorios y App		Cargadores		CROS		
Smart Key	•	Cargador de mesa	-	BiCore CROS R-Li	• ¹⁾	
TV Sound	•	Cargador portátil	-	BiCore CROS SR	-	
Smart Transmitter 2,4	•	Cargador de mesa+	-	BiCore CROS R312	• ¹⁾	
Smart Mic	•	Cargador de mesa custom	-			
Rexton App	•	Cargador universal por cable	-			
Programadores						
Noahlink Wireless	•					
ConnexxAir	-					
HI-PRO	-					

1) No disponible para PL10

BICORE CUSTOM LI




- › La Tecnología de Preservación del Habla (Speech Preservation Technology) ofrece por primera vez un procesamiento separado entre el habla objetivo proveniente del frente y el ruido no deseado desde atrás
- › Llamadas telefónicas manos libres a través del Modo Auricular con Call Control, al conectarse mediante MFi
- › Carga sin contacto para un manejo sencillo
- › Solución recargable para un día completo de uso:
 - > Custom Li ofrece hasta 24h de autonomía (incluidas 5h de streaming)
- › Resistente para afrontar los retos del día a día
- › La IA con Rexton Assist te ayuda a personalizar tus audífonos de manera sencilla


Colores




El rango de adaptación se basa en un acoplador de 2 cm:

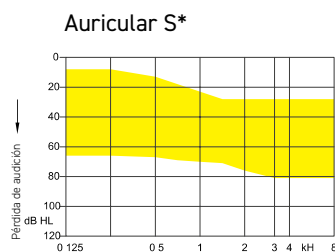

- 50 dB / 113 dB SPL (Acoplador de 2 cm)
- 61 dB / 125 dB SPL (Simulador de oído)

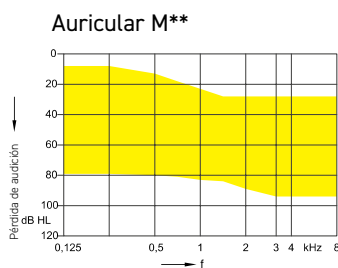

- 55 dB / 118 dB SPL (Acoplador de 2 cm)
- 66 dB / 128 dB SPL (Simulador de oído)

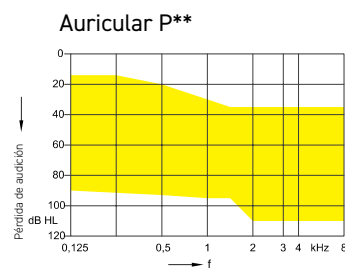

- 65 dB / 124 dB SPL (Acoplador de 2 cm)
- 75 dB / 135 dB SPL (Simulador de oído)

* Disponible para ITC

** Disponible tanto para ITC como para ITE

Características/Nivel de rendimiento	80	60	40	30	20
Canales/Controles/Programas	48/20/6	32/16/6	24/12/6	16/8/4	16/8/4
LED	-	-	-	-	-
T-coil	-	-	-	-	-
Bluetooth	•	•	•	•	•
Función de sonido para tinnitus	•	•	•	•	-
Función Notch para tinnitus	•	•	•	•	-
Sincronización inalámbrica	•	•	•	•	•
IP68	•	•	•	•	•
XPhone	•	•	•	•	•
Elementos tecnológicos					
Tecnología de Preservación del Habla	•	•	•	•	•
Rango de voz	•	•	•	•	•
My Voice 2.0	-	-	-	-	-
Sensor de movimiento para el análisis de la escena	•	•	•	-	-
Direccionalidad					
Adaptación automática	•	•	•	•	•
Localizador de sonido iOmni	-	-	-	-	-
Auto iFocus 360	•	-	-	-	-
iFocus 360	•	•	-	-	-
Auto Focus 360	-	•	-	-	-
iLock estéreo automático	•	•	•	-	-
Direccionalidad OneMic	-	-	-	-	-
Reducción de ruido					
Gestión de ruido	•	•	•	•	•
Sound Smoothing	•	•	•	•	-
Direccionalidad	•	•	-	-	-
Reducción de ruido de viento	•	•	•	•	-
Reductor automático de eco	•	-	-	-	-
Reductor de reverberación	•	•	-	•	-
Control y calidad de sonido					
Extensión de ancho de banda	•	-	-	-	-
Compresión de ancho de banda	•	•	•	•	•
Prevención de retroalimentación (Feedback)	•	•	•	•	•
Mejorador de música (ajustes preestablecidos)	3	3	1	1	-
Acclimatización automática	•	•	•	•	•
Transmisión de audio					
Bluetooth Classic	-	-	-	-	-
LE Audio	-	-	-	-	-
MFi	•	•	•	•	•
ASHA	•	•	•	•	•
Modo auriculares					
Bluetooth Classic	-	-	-	-	-
LE Audio	-	-	-	-	-
MFi	•	•	•	-	-
TeleCare					
Ajuste remoto en vivo completo	•	•	•	•	•
Ajuste remoto básico a través del portal	•	•	•	•	•
Accesorios y App		Cargadores		CROS	
Smart Key	•	Cargador de mesa	-	BiCore CROS R-Li	•
TV Sound	•	Cargador portátil	-	BiCore CROS SR	-
Smart Transmitter 2,4	•	Cargador de mesa+	-	BiCore CROS R312	•
Smart Mic	•	Cargador de mesa custom	•		
Rexton App	•	Cargador universal por cable	-		
Programadores					
Noahlink Wireless	•				
ConnexxAir	-				
HI-PRO	-				

TECNOLOGÍA MOTIONCORE



MY VOICE

El audífono reconoce el patrón de voz específico del usuario y lo integra de forma natural en lo que escucha. A su vez, esto proporciona al usuario una voz con sonido natural que favorece una alta tasa de aceptación. Gracias a ello, el usuario se comunicará más y será más activo socialmente, mejorando notablemente su calidad de vida.



SENSOR DE MOVIMIENTO

La tecnología MotionCore incorpora un sensor de movimiento en tiempo real que detecta el movimiento del usuario y utiliza esos datos para determinar con mayor precisión su situación sonora. Gracias a ello, los audífonos MotionCore pueden detectar automáticamente hasta 127 situaciones acústicas diferentes.



CONECTIVIDAD

Los audífonos MotionCore son compatibles con transmisión directa mediante Made for iPhone y, con Smart Transmitter 2.4 y Smart Mic, puedes transmitir audio desde tu televisor u otros dispositivos de audio directamente a tus audífonos.



REXTON ASSIST

Rexton Assist funciona sobre una red activa y en aprendizaje continuo que evoluciona constantemente para ofrecer soluciones a cualquier desafío al que se enfrente el usuario de audífonos. Rexton Assist aporta comodidad tanto al usuario como al profesional, mejorando el rendimiento del audífono en función de las necesidades del usuario, en cualquier momento y lugar.




M-CORE IX-CIC



- > Pila tamaño 10
- > Dispositivo Smart Demo disponible
- > Programación mediante ConnexxAir

Conector HI-PRO Flex

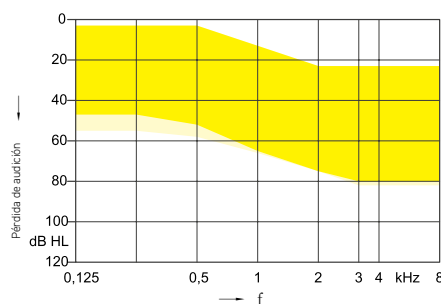

- 50 dB / 114 dB SPL (Acoplador de 2 ccm)
- 60 dB / 125 dB SPL (Simulador de oído)

Colores

Concha Red Blue Mocha Black

Faceplate

Red

Blue

Mocha

Black

Vented Click Sleeve

Closed Click Sleeve

Vented Click Sleeve
Closed Click Sleeve

Características/Nivel de rendimiento	80	60	40	30	20
Canales / Controles / Programas	48/20/6	32/16/6	24/12/6	16/8/4	16/8/4
My Voice	-	-	-	-	-
Voice Ranger	•	•	•	•	•
Transmisión directa	-	-	-	-	-
Sincronización inalámbrica	•	•	•	•	•
Direccionalidad	Automático / Adaptativo Omnidireccional	Automático / Adaptativo Omnidireccional	Automático / Adaptativo Omnidireccional	Omnidireccional	Omnidireccional
Reducción de ruido	Gestión de ruido Suavidad sonora Direccionalidad	Gestión de ruido Suavidad sonora Direccionalidad	Gestión de ruido Suavidad sonora	Gestión de ruido Suavidad sonora	Gestión de ruido
Reducción de ruido de viento	•	•	•	•	-
Prevención de retroalimentación (Feedback Preventer)	•	•	•	•	•
Reductor de reverberación	•	-	-	-	-
Ancho de banda: Extensión / Compresión	• / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Mejorador de música (ajustes preestablecidos)	3	3	1	1	-
Función de sonido para tinnitus	•	•	•	•	-
Función Notch para tinnitus	•	•	•	•	-
XPhone	•	•	•	-	-
Aclimatización	•	•	•	•	•
T-coil	-	-	-	-	-

Accesorios y App

Smart Key	•	•	•	•	•
TV Sound	-	-	-	-	-
Smart Transmitter 2.4	-	-	-	-	-
Smart Mic	-	-	-	-	-
Rexton App	•	•	•	•	•
M-Core CROS R	-	-	-	-	-
M-Core CROS R-Li	-	-	-	-	-
M-Core CROS iX-CIC	•	•	•	-	-

Batería

Duración de batería	hasta 70h
---------------------	-----------

M-CORE B-LI


- > Sensores de movimiento integrados para el análisis de entornos
- > Batería recargable de iones de litio para un día completo de uso
- > Dispositivos Smart Demo disponibles
- > Compatible con Rexton Assist
- > Programación mediante Noahlink Wireless

Colores



M-CORE B-LI M

- > Duración de la batería (sin streaming): hasta 24h
- > Duración de la batería (incl. 5h streaming): hasta 21h
- > Cargadores:
Cargador de mesa

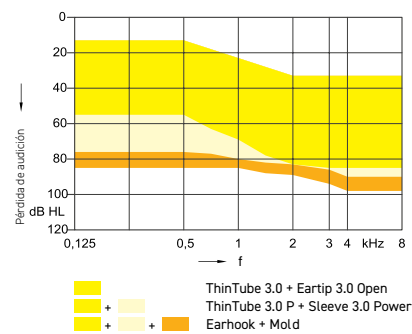


Codo

- 60 dB / 133 dB SPL (Acoplador de 2 ccm)
- 67 dB / 138 dB SPL (Simulador de oído)

M-CORE B-LI P

- > Duración de la batería (sin streaming): hasta 30h
- > Duración de la batería (incl. 5h streaming): hasta 27h
- > Cargadores:
Cargador de mesa B-P
Cargador de mesa+ B-P

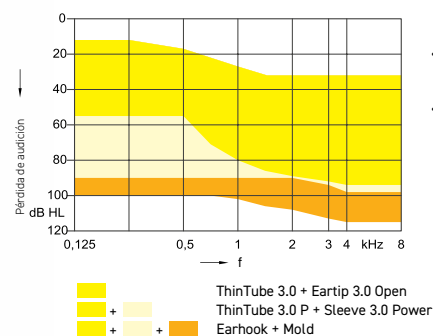


Codo

- 77 dB / 135 dB SPL (Acoplador de 2 ccm)
- 82 dB / 140 dB SPL (Simulador de oído)

M-CORE B-LI HP

- > Duración de la batería (sin streaming): hasta 61h
- > Duración de la batería (incl. 5h streaming): hasta 57h
- > Cargadores:
Cargador de mesa B-HP
Cargador de mesa+ B-HP

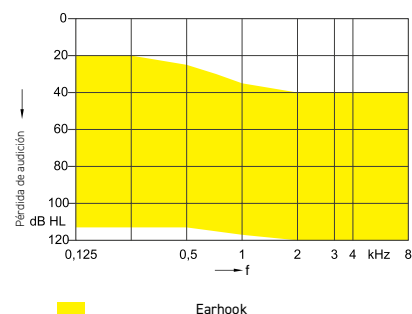

Codo

- 82 dB / 140 dB SPL (Acoplador de 2 ccm)
- 86 dB / 144 dB SPL (Simulador de oído)

Características/Nivel de rendimiento	80	60	40	30	20
Canales/Controles/Programas	48/20/6 ¹⁾	32/16/6	24/12/6	16/8/4	16/8/4
My Voice	•	•	•	-	-
Voice Ranger	•	•	•	•	•
Transmisión directa	Hecho para iPhone	Hecho para iPhone	Hecho para iPhone	Hecho para iPhone	Hecho para iPhone
Sincronización inalámbrica	•	•	•	•	•
Direccionalidad	Automático / Adaptativo iOmni Auto iFocus 360 iFocus 360 Auto Stereo iLock	Automático / Adaptativo iOmni Auto Focus 360 iFocus 360 Auto Stereo iLock	Automático / Adaptativo iOmni Auto Stereo iLock	Automático / Adaptativo iOmni	Automático / Adaptativo iOmni
Reducción de ruido	Gestión de ruido Suavidad sonora Direccionalidad	Gestión de ruido Suavidad sonora Direccionalidad	Gestión de ruido Suavidad sonora	Gestión de ruido Suavidad sonora	Gestión de ruido
Reducción de ruido de viento	•	•	•	•	-
Prevención de retroalimentación	•	•	•	•	•
Reductor de reverberación	•	-	-	-	-
Ancho de banda: Extensión/Compresión	• / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Mejorador de música (ajustes preestablecidos)	3	3	1	1	-
Función de sonido para tinnitus	•	•	•	•	-
Función Notch para tinnitus ²⁾	•	•	•	•	-
XPhone	•	•	•	-	-
Aclimatización	•	•	•	•	•
T-coil ³⁾	•	•	•	•	•
Accesorios y App					
Smart Key	•	•	•	•	•
TV Sound	•	•	•	•	•
Smart Transmitter 2.4	•	•	•	•	•
Smart Mic	•	•	•	•	•
Rexton App	•	•	•	•	•
M-Core CROS R	•	•	•	-	-
M-Core CROS R-Li	•	•	•	-	-
M-Core CROS iX-CIC	-	-	-	-	-

1) 34/20/6 para B-Li HP

2) No disponible para B-Li HP

3) No disponible para M-Core B-Li M

ACCESORIOS Y APP





MÁS QUE UN AUDÍFONO, UNA EXPERIENCIA COMPLETA

El compromiso de Rexton es ofrecer una gran experiencia auditiva, que va más allá de un simple audífono.

Con nuestra App y accesorios, los usuarios pueden sacar el máximo partido a su experiencia controlando y ajustando su audífono en cualquier momento y lugar, por sí mismos.

A través de una gama de accesorios, los usuarios también pueden transmitir audio directamente a sus dispositivos y disfrutar de sus aplicaciones de streaming favoritas. Nuestra gama de cargadores ofrece flexibilidad y opciones de energía que se adaptan a diferentes gustos y necesidades.

Con un solo clic, los usuarios pueden conectarse con un profesional de la salud auditiva para recibir asistencia o acceder a un sistema automatizado con inteligencia artificial con un 100% de eficiencia.

Con Rexton, puedes confiar en disfrutar de una experiencia auditiva completa y fluida todo el día.

CARGADORES DE MESA



Rexton ofrece una variedad de cargadores de sobremesa para la mayoría de los audífonos recargables; consulta más abajo qué versión está disponible para cada modelo de audífono.

Todas las estaciones de carga deben conectarse a una toma de corriente. Cuentan con encendido y apagado automáticos al colocar o retirar los audífonos del cargador. Una función de carga rápida de 30 minutos proporciona al usuario hasta 5,5 horas adicionales de uso cuando la batería está baja.

CARGADOR DE MESA (X)



TIPO DE CARGADOR

- Galvánico

COMPATIBILIDAD

- Reach R-Li T BC (R)
- Reach R-Li/R-Li T (R)
- Reach B-Li Rugged (B-M)
- M-Core B Li P (B-P)
- M-Core B Li HP (B-HP)

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO

- Cable de carga USB fijo
- Adaptador de corriente incluido

CARGADOR DE MESA CUSTOM



TIPO DE CARGADOR

- Resonancia magnética

COMPATIBILIDAD

- BiCore Custom-Li

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO

- Colocación intuitiva en el cargador
- LEDs para indicar los niveles de carga de los audífonos
- Incluye USB-C y adaptador de corriente

CARGADOR DE MESA



TIPO DE CARGADOR

- Inductivo

COMPATIBILIDAD

- M-Core B-Li M

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO

- Diseño con tapa protectora
- LEDs para indicar los niveles de carga de los audífonos
- Micro-USB y adaptador de corriente

CARGADORES PORTÁTILES



Los cargadores portátiles ofrecen a los usuarios la libertad de contar con baterías integradas que permiten varias cargas adicionales y proporcionan hasta cinco días de autonomía, sin necesidad de conectarse a una toma de corriente.

Todos los cargadores portátiles cuentan con encendido y apagado automáticos al colocar o retirar los audífonos del cargador. Una función de carga rápida de 30 minutos proporciona al usuario hasta 5,5 horas adicionales de uso cuando la batería está baja.

CARGADOR PORTÁTIL SLIM-RIC (X)



TIPO DE CARGADOR

- Galvánico

COMPATIBILIDAD

- Reach SR (2)

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO

- Ofrece 4 cargas (modelo 2) o 3 cargas respectivamente
- LEDs para mostrar el estado de la batería del audífono y del cargador
- Incluye USB-C y adaptador de corriente

CARGADOR PORTÁTIL RIC



TIPO DE CARGADOR

- Galvánico

COMPATIBILIDAD

- Reach R-Li T BC
- Reach R-Li/R-Li T

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO

- Ofrece 3 cargas
- LEDs para mostrar el estado de la batería del audífono y del cargador
- Incluye USB-C y adaptador de corriente

CARGADOR PORTÁTIL IF CIC



TIPO DE CARGADOR

- Galvánico

COMPATIBILIDAD

- Reach inoX-CIC Li

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO

- Ofrece 4 cargas
- LEDs para mostrar el estado de la batería del audífono y del cargador
- Incluye USB-C y adaptador de corriente

CARGADORES DE MESA+



Equipada con función de secado e higiene mediante luz UV integrada, el cargador de mesa+ es una solución todo en uno para cada usuario.

El cargador de mesa+ se ofrece en varios modelos según el audífono a cargar; consulta más abajo qué modelo está disponible para cada tipo de audífono.

Todos los cargadores de mesa+ deben conectarse a una toma de corriente. Cuentan con encendido y apagado automáticos al colocar o retirar los audífonos del cargador. Una función de carga rápida de 30 minutos proporciona al usuario hasta 5,5 horas adicionales de uso cuando la batería está baja.

CARGADOR DE MESA+ (X)



TIPO DE CARGADOR

- Galvánico

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO

- LEDs para indicar los niveles de carga de los audífonos
- Incluye USB-C y adaptador de corriente

COMPATIBILIDAD

- Reach R-Li T BC (R)
- Reach R-Li/R-Li T (R)
- Reach SR (SR)
- M-Core B-Li P (B-P)
- M-Core B-Li HP (B-HP)

CARGADORES CON CABLE



El cargador con cable es un cargador minimalista, práctico y ligero. Utilizando carga galvánica, es compatible con varios audífonos de Rexton, pero sobre todo está diseñado y desarrollado para adaptarse a los audífonos Rexton ReCharge.

Las fundas del cargador son desmontables para facilitar el mantenimiento de los contactos de carga, y las fundas blandas están hechas para adaptarse a diferentes tamaños de audífonos.

CARGADOR UNIVERSAL



TIPO DE CARGADOR

- Galvánico

COMPATIBILIDAD

- Reach R-Li T BC
- Reach R-Li/R-Li T
- Reach B-Li Rugged
- M-Core B Li P
- M-Core B Li HP

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO

- Soporte opcional disponible para una estabilidad optimizada
- Cable de carga USB fijo

REXTON APP



Con Rexton App, los usuarios pueden controlar cómodamente sus audífonos ya que transforma un smartphone en un discreto control remoto.

Las llamadas telefónicas se redirigen directamente desde el smartphone y tienen prioridad sobre otras señales de audio; la música transmitida se puede escuchar en estéreo, de forma directa y sin necesitar ningún dispositivo adicional.*

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Los programas de audición y el volumen se pueden ajustar con total discreción
- El volumen de los audífonos derecho e izquierdo se puede ajustar por separado
- Control de direccionalidad
- Asistencia remota
- Estado de la batería en tiempo real

¡Descarga Rexton App ahora!



iOS



Android


*Comprueba la compatibilidad de tu audífono y smartphone



REXTON ASSIST

Nuestra red neuronal de inteligencia artificial en la nube permite a los usuarios hacer cambios en la programación en tiempo real, sobre la marcha. Los usuarios pueden personalizar el funcionamiento de sus audífonos justo en el momento y en el lugar donde están teniendo dificultades, sin tener que esperar a una cita presencial o virtual.

Después de recibir las soluciones definidas para esa situación concreta, los usuarios dan su valoración en una plataforma en vivo que va evolucionando en función del nivel de satisfacción de los usuarios.

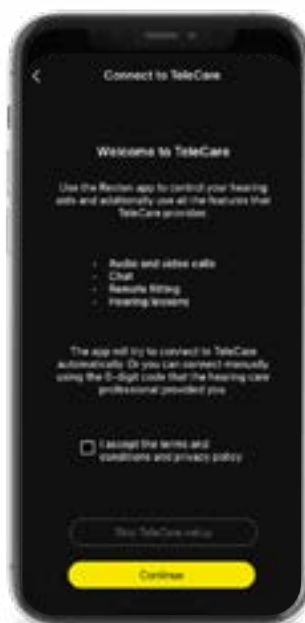

REXTON TELECARE

Con Telecare**, los especialistas en audición pueden ampliar sus servicios y ofrecer a los pacientes asistencia remota con:

- Mensajes instantáneos
- Llamadas de audio y vídeo
- Ajustes a medida

**La interfaz Telecare puede ser diferente según la tecnología y el diseño

TRANSMISIÓN DE AUDIO

Rexton ofrece dispositivos de transmisión de audio como interfaces para mantener a los usuarios conectados y garantizar una experiencia auditiva agradable en cualquier situación. Compatible únicamente con audífonos con Bluetooth.

TV SOUND

NUEVO



El nuevo TV Sound ayudará al usuario de audífonos a escuchar la televisión directamente en sus audífonos. Presenta un diseño renovado junto con una latencia inferior a 30 ms para todas las entradas. El TV Sound puede vincularse con varios pares de audífonos al mismo tiempo para un disfrute compartido.

CARACTERÍSTICAS

- Conexión automática a los audífonos ya emparejados
- LED de estado que indica encendido, emparejamiento y transmisión
- Solo incluye cable USB, sin adaptador de corriente



SMART MIC



El Smart Mic permite realizar llamadas telefónicas con manos libres sin que el usuario tenga que coger su smartphone. En entornos auditivos difíciles, puede usarse fácilmente como un micrófono adicional.

CARACTERÍSTICAS

- Transmisión directa desde smartphones Android
- Escucha música con calidad estéreo
- Puede usarse como micrófono de conferencia



CONTROL REMOTO

Controla fácilmente y de forma rápida el volumen de tu audífono con un solo toque.

SMART KEY



Con Smart Key, los programas y el volumen del audífono pueden ajustarse fácilmente. Un bloqueo de teclas evita que los botones se pulsen accidentalmente y un LED de estado indica si el mando a distancia está encendido o apagado.



CARACTERÍSTICAS

- Pequeño para llevar en tu llavero
- Control mediante sonidos de alta frecuencia

MINIRECEIVER 3.0

EarWear 3.0 ofrece una solución completa: muy fiable en su rendimiento acústico y muy resistente, mejorando el aspecto estético, así como el ajuste físico y la sujeción en el oído.



Nuestros miniReceiver 3.0 están rigurosamente probados y pueden resistir la humedad y el sudor, la exposición al sol y al calor. Pueden soportar movimientos y dobleces, e incluso una tracción de 1,5 kg.

*El miniReceiver 3.0 en longitud 5 y/o el receptor HP no se recomienda para SR debido al tamaño compacto de su cargador portátil.

AURICULAR S



TAMAÑO	UNIDADES	NÚMERO DE ARTÍCULO
miniReceiver 3.0 0R S	1	10992548
miniReceiver 3.0 0L S	1	10992549
miniReceiver 3.0 1R S	1	10992550
miniReceiver 3.0 1L S	1	10992552
miniReceiver 3.0 2R S	1	10992553
miniReceiver 3.0 2L S	1	10992554
miniReceiver 3.0 3R S	1	10992555
miniReceiver 3.0 3L S	1	10992556
miniReceiver 3.0 4R S	1	10992557
miniReceiver 3.0 4L S	1	10992558
miniReceiver 3.0 5R S	1	21023207
miniReceiver 3.0 5L S	1	21023211

AURICULAR M



miniReceiver 3.0 0R M	1	10992559
miniReceiver 3.0 0L M	1	10992560
miniReceiver 3.0 1R M	1	10992561
miniReceiver 3.0 1L M	1	10992562
miniReceiver 3.0 2R M	1	10992563
miniReceiver 3.0 2L M	1	10992564
miniReceiver 3.0 3R M	1	10992565
miniReceiver 3.0 3L M	1	10992566
miniReceiver 3.0 4R M	1	10992567
miniReceiver 3.0 4L M	1	10992568
miniReceiver 3.0 5R M	1	21023215
miniReceiver 3.0 5L M	1	21023216

AURICULAR P



miniReceiver 3.0 0R P	1	10992569
miniReceiver 3.0 0L P	1	10992570
miniReceiver 3.0 1R P	1	10992571
miniReceiver 3.0 1L P	1	10992572
miniReceiver 3.0 2R P	1	10992573
miniReceiver 3.0 2L P	1	10992574
miniReceiver 3.0 3R P	1	10992575
miniReceiver 3.0 3L P	1	10992576
miniReceiver 3.0 4R P	1	10992577
miniReceiver 3.0 4L P	1	10992578
miniReceiver 3.0 5R P	1	21023217
miniReceiver 3.0 5L P	1	21023218

AURICULAR HP



Por favor, solicita el miniReceiver tamaño HP con una carcasa a medida de la misma manera que un audífono a medida, utilizando el formulario de pedido.

THINTUBE 3.0

Con dos diámetros diferentes, nuestro ThinTube 3.0 de diseño estético es adecuado para pérdidas auditivas de leves a severas.



ThinTube 3.0 (0.9mm)



TAMAÑO	UNIDADES	NÚMERO DE ARTÍCULO
Set ThinTube 3.0 S0	1R + 1L	10991609
Set ThinTube 3.0 S1	1R + 1L	10991610
Set ThinTube 3.0 S2	1R + 1L	10991611
Set ThinTube 3.0 S3	1R + 1L	10991612
Set ThinTube 3.0 S4	1R + 1L	10991613

ThinTube 3.0 P (1.4mm)



Set ThinTube 3.0 S0 P	1R + 1L	10992492
Set ThinTube 3.0 S1 P	1R + 1L	10992493
Set ThinTube 3.0 S2 P	1R + 1L	10992494
Set ThinTube 3.0 S3 P	1R + 1L	10992495
Set ThinTube 3.0 S4 P	1R + 1L	10992496

EARTIP 3.0 Y SLEEVE 3.0

Para un uso y manejo sencillos, tanto el miniReceiver 3.0 como el ThinTube 3.0 son compatibles con el Eartip 3.0 y el Sleeve 3.0.

Están fabricados en un material blando que permite una inserción profunda incluso en los canales auditivos más pequeños. La interfaz fiable hace que sean fáciles de intercambiar y seguros de usar.

SLEEVE 3.0

TIPO	TAMAÑO	UNIDADES	NÚMERO DE ARTÍCULO
Con ventilación 	XS	6	10992863
	S	6	10992864
	M	6	10992865
	L	6	10992866
Cerrado 	XS	6	10992867
	S	6	10992868
	M	6	10992869
	L	6	10992870
Potencia 	XS	6	10997192
	S	6	10997193
	M	6	10997194
	L	6	10997195

EARTIP 3.0

TIPO	TAMAÑO	UNIDADES	NÚMERO DE ARTÍCULO
Abierto 	5mm	6	10993678
	7mm	6	10993680
	10mm	6	10993681
Tulip 	8mm	6	10993682
	12mm	6	10993683

EARMOLD 3.0



Corto



Largo

El molde a medida 3.0 es compatible con miniReceiver 3.0 y ThinTube 3.0. Está disponible en modelos cortos y largos.

MINIRECEIVER 2.0

	TAMAÑO	UNIDADES	NÚMERO DE ARTÍCULO
 AURICULAR S	miniReceiver 2.0 0L S	1	10669907
	miniReceiver 2.0 0R S	1	10669908
	miniReceiver 2.0 1L S	1	10669909
	miniReceiver 2.0 1R S	1	10669910
	miniReceiver 2.0 2L S	1	10669911
	miniReceiver 2.0 2R S	1	10669912
	miniReceiver 2.0 3L S	1	10669913
	miniReceiver 2.0 3R S	1	10669914
 AURICULAR M	miniReceiver 2.0 0L M	1	10824820
	miniReceiver 2.0 0R M	1	10824821
	miniReceiver 2.0 1L M	1	10824822
	miniReceiver 2.0 1R M	1	10824823
	miniReceiver 2.0 2L M	1	10824824
	miniReceiver 2.0 2R M	1	10824825
	miniReceiver 2.0 3L M	1	10824826
	miniReceiver 2.0 3R M	1	10824827
 AURICULAR P	miniReceiver 2.0 4L M	1	10933054
	miniReceiver 2.0 4R M	1	10933053
	miniReceiver 2.0 0L P	1	10669923
	miniReceiver 2.0 0R P	1	10669924
	miniReceiver 2.0 1L P	1	10669925
	miniReceiver 2.0 1R P	1	10669926
	miniReceiver 2.0 2L P	1	10669927
	miniReceiver 2.0 2R P	1	10669928
 AURICULAR HP	miniReceiver 2.0 3L P	1	10669929
	miniReceiver 2.0 3R P	1	10669930

Por favor, solicita el miniReceiver tamaño HP con un molde a medida de la misma manera que un audífono a medida, utilizando el formulario de pedido.

ADAPTADORES PARA MINIRECEIVER 2.0

CLICK DOMES

TIPO	TAMAÑO	UNIDADES	NÚMERO DE ARTÍCULO
Abierto	4 mm	6	10426016
	8 mm	6	10426014
	10 mm	6	10426015
Tulip	8-12 mm	6	10670790
Cerrado	6 mm	6	10426017
	8 mm	6	10426012
	10 mm	6	10426013
Doble	8/10 mm	6	10426018
	10/12 mm	6	10426019

CLICK SLEEVES

TIPO	TAMAÑO	UNIDADES	NÚMERO DE ARTÍCULO
Con ventilación	XS	6	10951152
	S	6	10951146
	M	6	10951148
	L	6	10951150
Cerrado	XS	6	10951153
	S	6	10951147
	M	6	10951149
	L	6	10951151

TIPOS DE CLICK MOLD



COMPATIBILIDAD DE CONSUMIBLES

ARTÍCULO	UNIDADES	NÚMERO DE ARTÍCULO	COMPATIBILIDAD
WaxGuard 3.0 NanoCare	8	10993649	miniReceiver 3.0 ThinTube 3.0 Earmold 3.0
WaxGuard 3.0 CeruStop XL	8	10999334	miniReceiver 3.0 HP
WaxGuard QuickGuard	8	10962504	Click Mold miniReceiver 2.0 HP para todos los modelos a medida
WaxGuard miniReceiver	8	10962332	miniReceiver 2.0 inoX-CIC Li / iX-CIC

	miniReceiver 3.0	ThinTube 3.0	Eartip 3.0 y Sleeve 3.0	Earmold 3.0	miniReceiver 2.0	Click Dome y Click Sleeve	Click Mold
Reach R-Li T BC	x		x	x			
Reach R-Li / R-Li T	x		x	x			
Reach SR	x		x				
Reach Rugged		x	x				
Reach inoX-CIC Li			x	x			
BiCore R312	x		x	x			
M-Core B-Li M / B-Li P		x	x				
M-Core iX-CIC						x	

	Codo estándar	Codo pequeño	Concha Lock 3.0	Concha Lock Sleeve 3.0	Concha Lock
Reach R-Li T BC			x	x	
Reach R-Li / R-Li T			x	x	
Reach SR			x	x	
Reach Rugged	H3660 (10980402)	H3660 (10980403)	x	x (S)	
BiCore R312			x	x	
M-Core B-Li M / B-Li P	H3660 (10980402)	H3660 (10980403)	x	x (S)	
M-Core B-Li HP	H3640 (10993619)	H3640 (10993620)			

HERRAMIENTAS DE APOYO

ARTÍCULO		NÚMERO DE ARTÍCULO
Herramienta de extracción miniReceiver 2.0		10674370
Calibrador de medición para S/M miniReceiver 2.0		10174571
Calibrador de medición para P/ HP miniReceiver 2.0		10674512
Herramienta de extracción Click Dome		10605854
Set de servicio Click Mold		10597930
Kit de herramientas de extracción		10419505
Calibrador de medición para miniReceiver 3.0 y ThinTube 3.0		10991403
Herramienta de manipulación 3.0 para molde a medida con ThinTube 3.0		10969958
Herramienta de extracción 3.0 para fijar mejor el ThinTube 3.0 en el intercambio de Eartip/ Sleeve		10967340

PILAS



10931556



10931555



10931554



10931553

[illegible]

[illegible]

Creemos que nada relacionado con la audición debe dejarse nunca al azar, ni para las personas con pérdida auditiva, ni para quienes dependen de ellas. Entendemos sus desafíos y los afrontamos con una tecnología auditiva probada y fiable, en la que se puede confiar incluso en los entornos más desafiantes. En el trabajo, en casa, haciendo ejercicio y bajo cualquier clima, siempre puedes CONFIAR EN REXTON.

iPhone es una marca registrada de Apple Inc. en EE. UU. y otros países. Android es una marca registrada de Google Inc. La palabra y los logotipos Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG Inc. El símbolo "Qi" es una marca registrada del Wireless Power Consortium. Cualquier uso de dichas marcas por parte de WSAUD A/S se rige por un acuerdo de licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales siguen siendo propiedad de sus respectivos dueños. La duración real de las baterías depende de la calidad de la batería, la pérdida auditiva, el entorno sonoro, el uso y las funciones activadas.

REXTON